




# 이상운동증 진단 어플리케이션 설치 메뉴얼

황보효정<sup>1</sup>, 윤다은<sup>1</sup>, 하재경<sup>1</sup>, 배수한<sup>1</sup>, 권효정<sup>1</sup>, 장지현<sup>1</sup>, 권다은<sup>1</sup>, 안민규<sup>1</sup> 한동대학교


> ahnbcilab@gmail.com 연구실 홈페이지(https://bcilab.handong.edu/home) 깃헙 링크()

#### 오픈소스 다운받기(1)

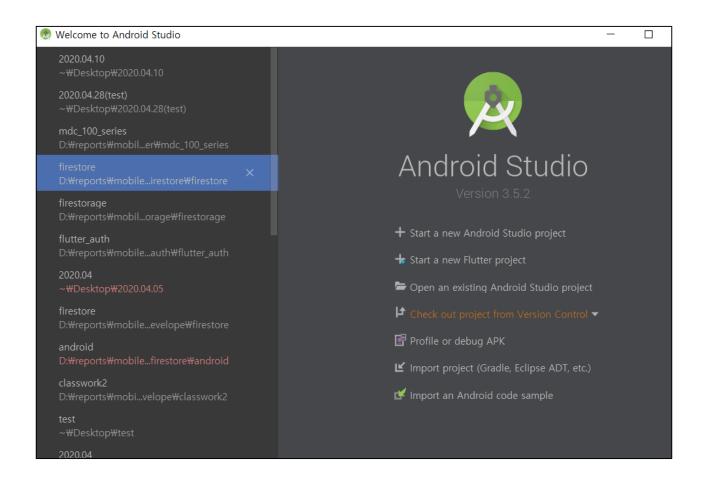

Android studio 초기 화면에서 'Check out project from Version Control'을 클릭한 뒤, Git 옵션을 선택합니다

# 오픈소스 다운받기(2)

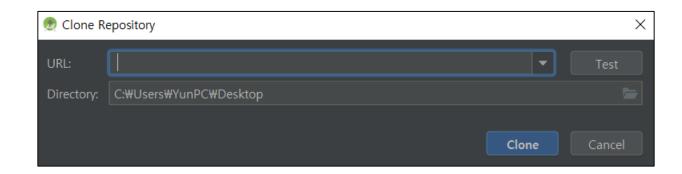


URL에 아래 주소를 복사하여 붙여넣고 원하는 경로를 설정합니다.

URL: https://github.com/AhnBCILab/TremorQuantification\_ver2-App.git

#### 데이터베이스 연동하기(1)


모든 소스코드를 다운받으면 위 그림과 같은 에러가 뜹니다 에러의 원인은 파이어베이스를 연동하는데 필요한 google-services.json파일이 없기 때문입니다

## 데이터베이스 연동하기(2)

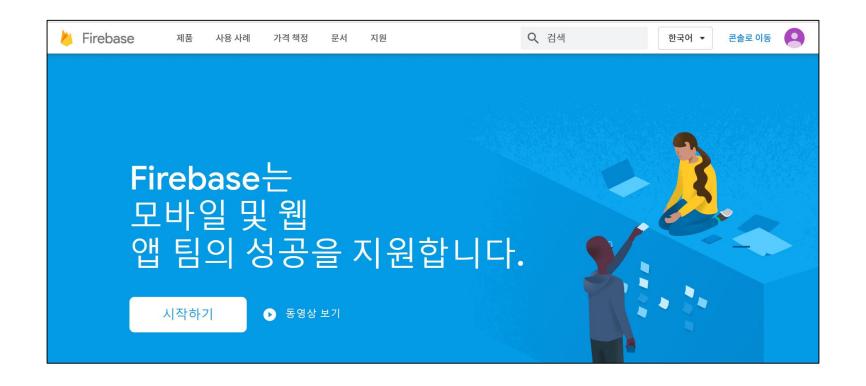


데이터베이스 생성을 위해 파이어베이스 홈페이지에 접속합니다 '시작하기' 버튼을 눌러 콘솔로 이동합니다

# 데이터베이스 연동하기(3)

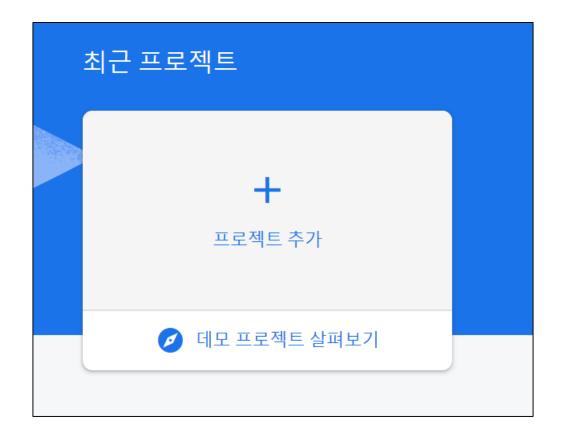


'프로젝트 추가'를 클릭합니다

## 데이터베이스 연동하기(4)

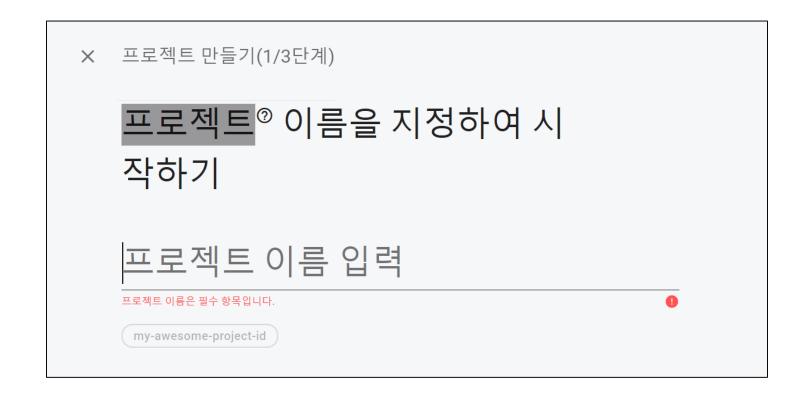


프로젝트 이름을 지정합니다

## 데이터베이스 연동하기(5)

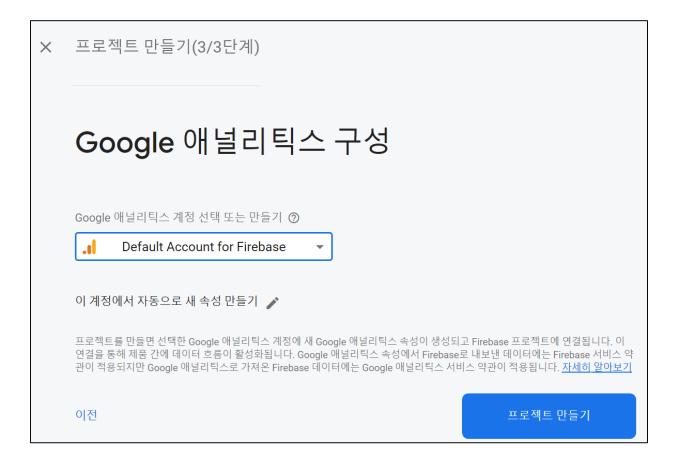


구글 애널리틱스 계정을 선택하거나 또는 만들고나서 '프로젝트 만들기'를 클릭합니다

#### 데이터베이스 연동하기(6)

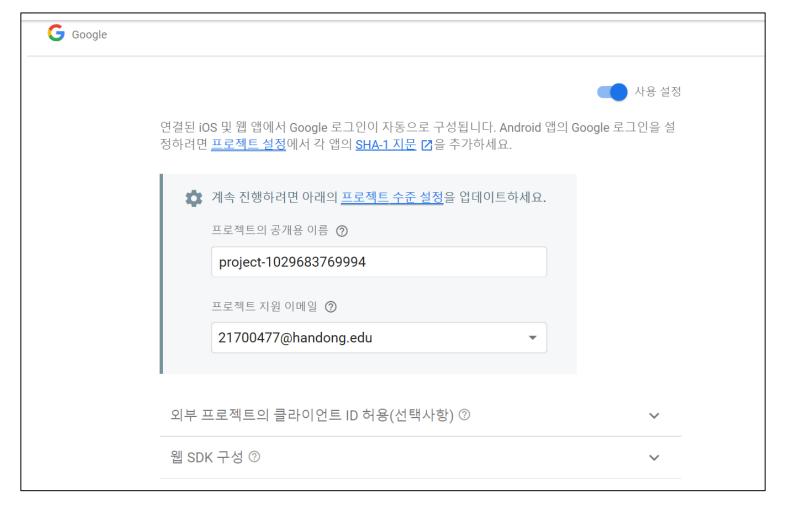


프로젝트를 만들고 'Authentication' 탭에 들어갑니다 본 앱은 구글로그인을 지원하므로 구글로그인을 클릭하여 사용을 활성화합니다 프로젝트 지원 이메일을 작성합니다.

## 데이터베이스 연동하기(7)

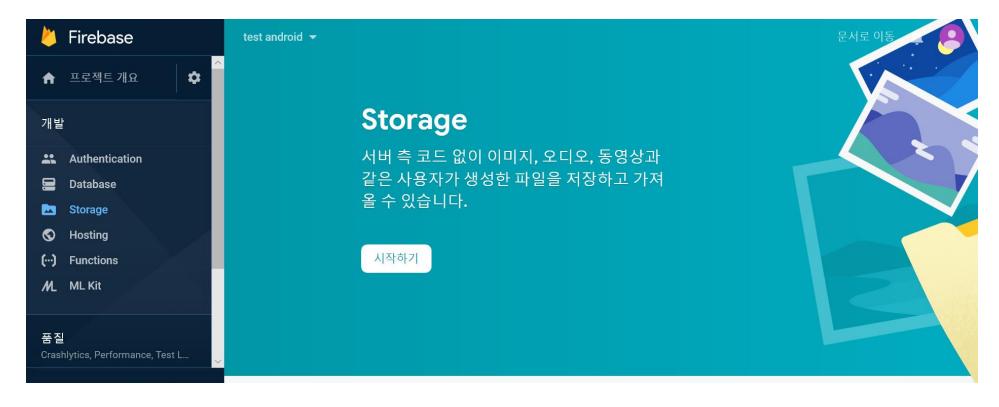


이미지와 데이터 파일을 저장하기 위한 Storage를 시작합니다.

#### 데이터베이스 연동하기(8)

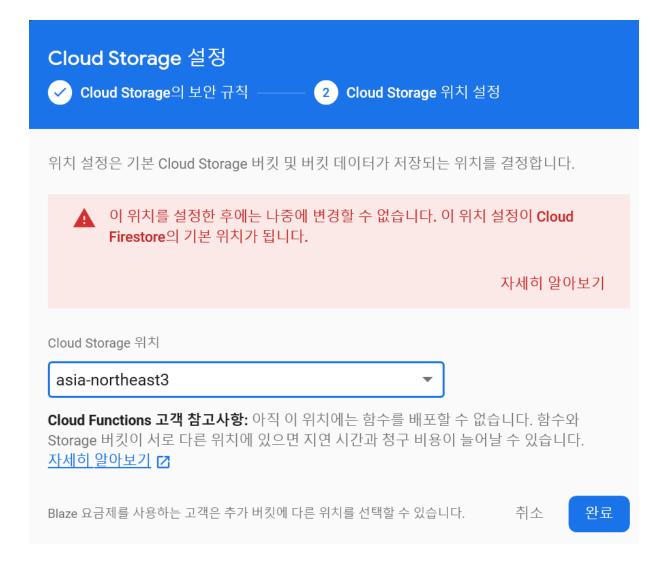


Cloud Stroage의 위치를 설정하고 완료버튼을 누릅니다.

## 데이터베이스 연동하기(9)

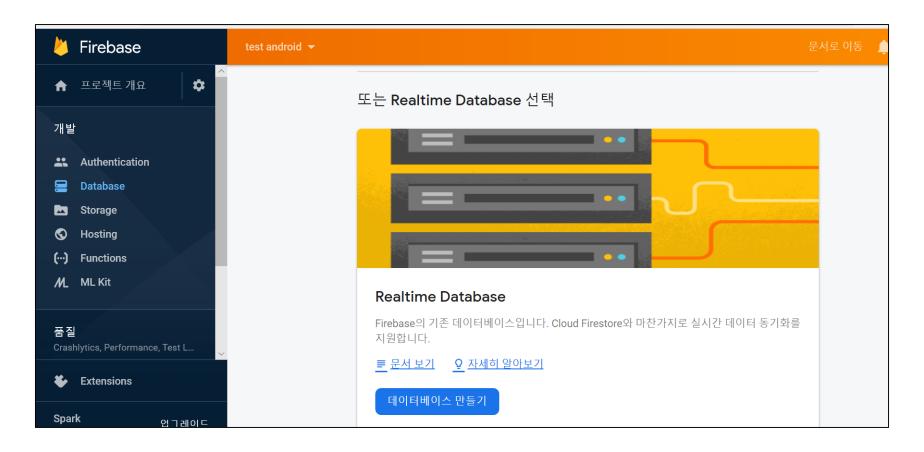


Database 탭에 들어가서 Realtime Database 항목의 데이베이스 만들기 버튼을 클릭합니다

## 데이터베이스 연동하기(10)

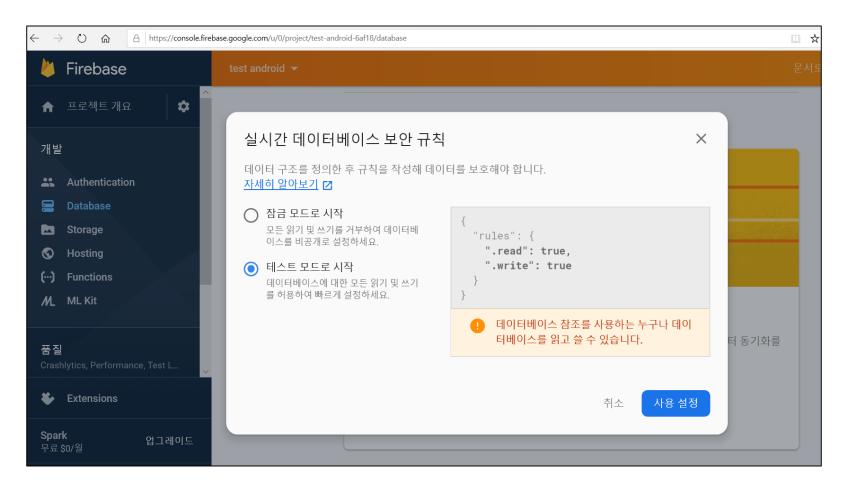

본인에게 적합한 보안 규칙을 선택하고 사용 설정을 클릭하세요

## 데이터베이스 연동하기(10)

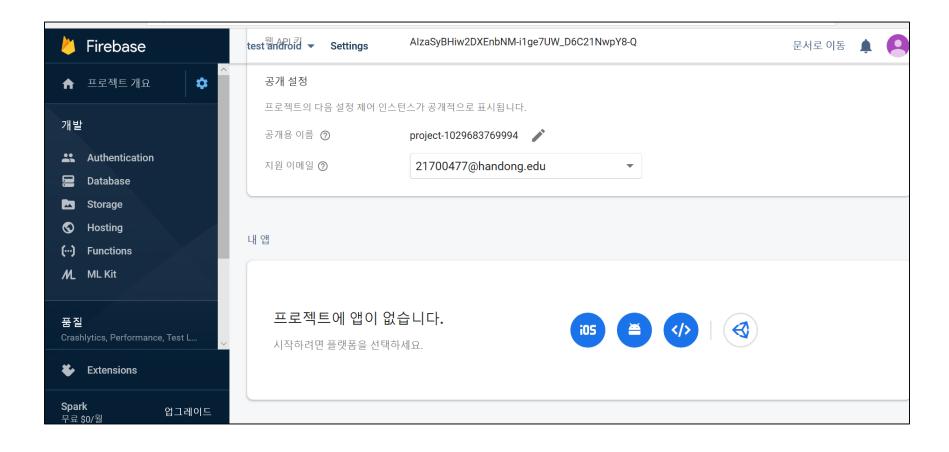

기본 작업을 마쳤으면 파이어베이스 프로젝트에 앱을 등록해야 합니다 좌측 상단의 톱니바퀴버튼을 클릭하고 안드로이드 아이콘을 클릭합니다

# 데이터베이스 연동하기(11)

× Android 앱에 Firebase 추가	
1	앱 등록
	Android 패키지 이름 ⑦
	com.company.appname
	앱 닉네임 (선택사항) ⑦
	내 Android 앱
	디버그 서명 인증서 SHA-1(선택사항) ⑦
	00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
	인증에서 동적 링크, 초대, Google 로그인, 전화번호를 지원하는 데 필요합니다. 설정에서 SHA-1을 수정하세요.
	앱 등록


패키지 이름과 SHA-1을 등록해야 합니다 패키지 이름과 SHA-1을 얻는 방법은 다음 슬라이드에 소개하겠습니다

## 데이터베이스 연동하기(12)

```
🖶 2020.04.28(test) 🕽 📭 app 🕽 🗬 build.gradle
🖷 Android 🔻
                                          2020.04.28(test)
 📑 арр
                                          Configure project in Project Structure dialog.
 ▶ manifests
 ▼ i java
    com.ahnbcilab.tremorquantification
    com.ahnbcilab.tremorquantification
    com.ahnbcilab.tremorquantification
 ▼ Is java (generated)
                                                  android {
    com.ahnbcilab.tremorquantification
                                                      compileSdkVersion 28
         buildConfig
                                                      defaultConfig {
 ▶ Ieres
 res (generated)
  Gradle Scripts
                                                          targetSdkVersion 27
    w build.gradle (Project: 2020.04.28(test)) 13
    w build.gradle (Module: app)
    gradle-wrapper.properties (Gradle Vers 15
    proguard-rules.pro (ProGuard Rules fo 16
    gradle.properties (Project Properties)
                                                           release {
    settings.gradle (Project Settings)
    local.properties (SDK Location)
                                                              proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
```


패키지 이름은 App수준의 build.gradle파일에 들어가서 applicationId 옆에 있는 문자열입니다

#### 데이터베이스 연동하기(13)

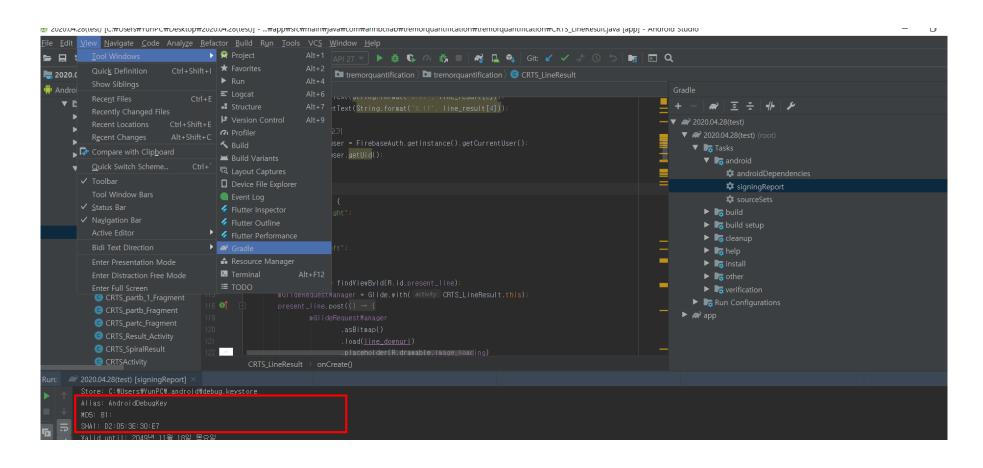


본인 기기의 SHA-1을 보기 위해서 View ->Tool Windows -> Gradle -> signingReport에 들어가면 콘솔창에 본인의 SHA1키가 나타납니다

#### 데이터베이스 연동하기(14)

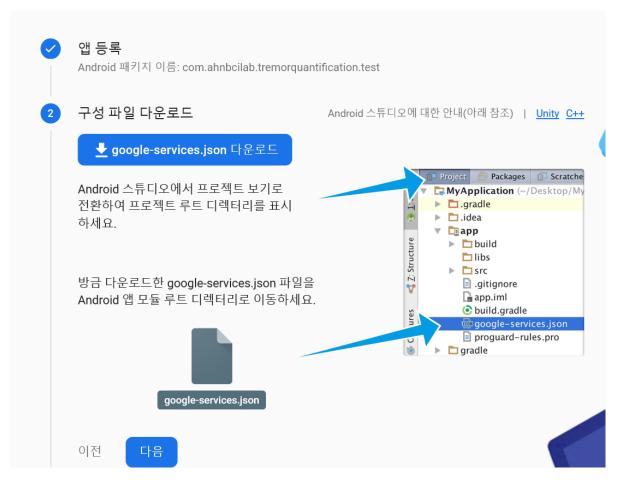

패키지 이름과 SHA-1키를 등록하고 google-services.json 파일을 다운받아 app폴더 하단에 넣습니다

#### 데이터베이스 연동하기(15)

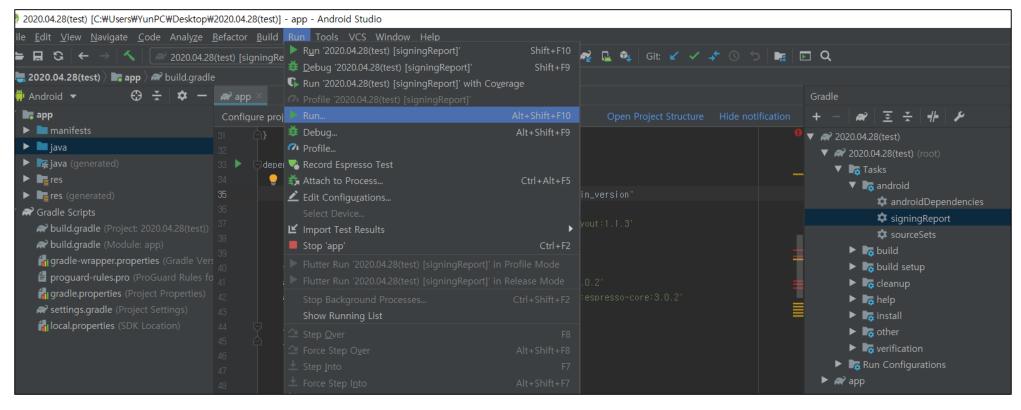

파일을 넣은 뒤, 안드로이드 스튜디오에서 Run탭에서 Run을 선택하여 앱 빌드를 합니다 (SHA-1키를 본 후에는 이 과정이 꼭 필요합니다.

SHA-1키를 안드로이드 스튜디오 상에서 본 것이 아닌 경우 Run버튼을 바로 누르셔도 됩니다)